

# FC-Cure PRO

## Equipo Láser Portátil Terapéutico



# Calidad-Confiable-Innovación

El FC-Cure PRO no solo es eficiente en tratar ciertos problemas crónicos con gran éxito, sino que reduce el dolor de forma importante y además contribuye positivamente a la regeneración de los tejidos de forma rápida, reduciendo con ello el tiempo de recuperación en los animales.

El FC-Cure PRO cuenta con una luz láser potente con capacidad para penetrar en los tejidos profundos. Esta luz provoca una serie de reacciones sobre las células y los tejidos (fotobioestimulación) haciendo posible que se reduzca el dolor que sufre el animal por diferentes patologías y por otro estimula a las células, acelerando la curación y cicatrización de heridas tanto internas como externas.

Ya que se trata de un tratamiento sin ningún efecto adverso conocido, puede aplicarse a animales muy mayores, sensibles a ciertas medicaciones o con enfermedades crónicas que impiden el uso de ciertos fármacos. En muchos casos, además, se usa de forma paralela con tratamientos médicos para acelerar los procesos de curación, aliviar algunos síntomas y reducir las dosis y sus efectos secundarios.

El FC-Cure PRO cuenta con el respaldo de una batería recargable de larga duración, cuando está completamente cargado durante 4 horas, su tiempo de duración alcanza más de 6 días

**UN AÑO DE GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN**

## Características

10 diodos láser que emiten luz láser de 650 nm

5 diodos láser que emiten luz láser de 808 nm


Potencia de salida de 1300mW±20%

No invasivo y sin efectos secundarios conocidos

Tratamiento seguro y clínicamente probado

Portátil, inalámbrico y liviano

Batería de litio recargable de larga duración 5000mAh

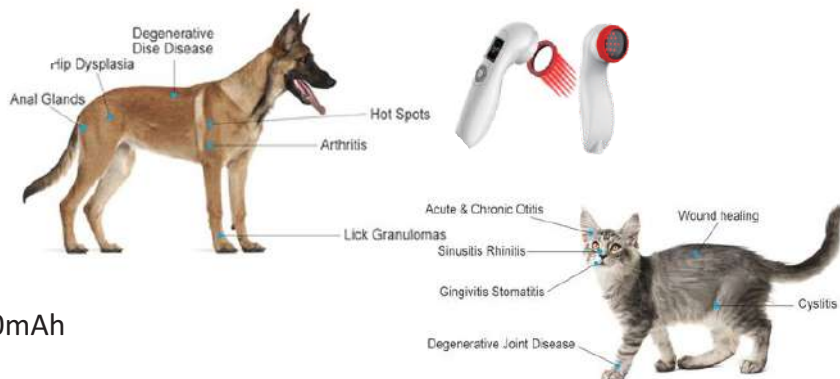

## Especificaciones

Longitud de onda láser	10*650nm pcs+5*808nm
La potencia máxima de salida de láser	1300mW±20%
Capacidad de la batería	Batería de litio incorporada 5000mAh
Longitud de onda láser	808Nm±20nm y 650nm±20nm
El terminal de salida de láser	5 haces de láser con 808nm y 250mW cada una de rayo láser, salida invisible 10 haces de láser con 650nm, 5mW cada una de rayo láser, el resultado visible
Material de la caja	ABS
Material de lente	Vidrio templado
Modo de trabajo	El pulso y el modo de modo continuo
El ajuste de tiempo	5 a 60 minutos, 5 minutos como intervalo
Función	El dispositivo puede trabajar con conexión de alimentación mientras la batería muere
Cargador de batería	US/EU plug estándar. 4 horas en una carga completa.
Ajuste de potencia	Tres ajustes
Mostrar	Pantalla LCD de color, tamaño 29x19mm

## Incluye

Unidad principal

Enchufe adaptador de corriente

Cable USB tipo C

Gafas protectoras

Estuche de transporte



## FUERTE CARE SAS

Dirección: Carrera 31 # 24-65  
Palmira Valle. Colombia 763533